

- SCHRITT 1:** Wählen Sie eine Stelle aus.
- SCHRITT 2:** Waschen Sie die Stelle mit Seife, trocknen Sie sie ab und reinigen Sie sie dann mit einem Alkoholtuch. Lassen Sie die Stelle trocknen.
- SCHRITT 3:** Ziehen Sie den Deckel von der Sensorpackung vollständig ab. Nehmen Sie die Kappe vom Sensorapplikator ab.

VORSICHT: Die Sensorcodes auf der Sensorpackung und dem Sensorapplikator müssen übereinstimmen. Verwenden Sie die Packung NICHT, wenn sie beschädigt oder bereits geöffnet ist.

- SCHRITT 4:** Richten Sie die dunklen Markierungen auf dem Sensorapplikator und der Sensorpackung aneinander aus. Drücken Sie den Sensorapplikator fest bis zum Anschlag auf die Packung, während diese auf einer harten Fläche steht.
- SCHRITT 5:** Ziehen Sie den Sensorapplikator aus der Sensorpackung heraus.
- SCHRITT 6:** Der Sensorapplikator ist bereit zum Anbringen des Sensors.


VORSICHT: Im Sensorapplikator sitzt jetzt eine Nadel. Fassen Sie nicht in den Sensorapplikator und setzen Sie ihn nicht wieder auf die Sensorpackung auf.

- SCHRITT 7:** Platzieren Sie den Sensorapplikator über der Stelle. Drücken Sie den Sensorapplikator fest auf die Haut, um den Sensor anzubringen.

VORSICHT: Drücken Sie den Sensorapplikator ERST DANN auf die Haut, wenn er sich über der vorbereiteten Stelle befindet, um eine versehentlich falsche Platzierung oder Verletzung zu vermeiden.

- SCHRITT 8:** Ziehen Sie den Sensorapplikator vorsichtig vom Sensor ab.
- SCHRITT 9:** Vergewissern Sie sich, dass der Sensor fest sitzt. Entsorgen Sie die gebrauchte Sensorpackung und den gebrauchten Sensorapplikator. Siehe Abschnitt *Entsorgung* im Benutzerhandbuch.

Beachten Sie bei der Verwendung Ihres Sensors alle mit dem Lesegerätset mitgelieferten Produktunterlagen. Wenn Sie FreeStyle LibreLink verwenden, schlagen Sie im Benutzerhandbuch in der App nach.



40987-011A

- ÉTAPE 1 :** Sélectionnez le site.
- ÉTAPE 2 :** Lavez le site avec du savon ordinaire, séchez puis nettoyez avec une lingette imprégnée d'alcool. Laissez sécher le site.
- ÉTAPE 3 :** Retirez complètement l'opercule du pack de capteur. Dévissez le capuchon de l'applicateur de capteur.

MISE EN GARDE : les codes de capteur doivent correspondre sur le pack de capteur et sur l'applicateur de capteur. N'utilisez PAS le dispositif s'il est endommagé ou déjà ouvert.

- ÉTAPE 4 :** Alignez les marques sombres sur l'applicateur de capteur et sur le pack de capteur. Sur une surface rigide, appuyez fermement sur l'applicateur de capteur vers le bas jusqu'à atteindre une butée.
- ÉTAPE 5 :** Soulevez l'applicateur de capteur hors du pack de capteur.
- ÉTAPE 6 :** L'applicateur de capteur est prêt à appliquer le capteur.

MISE EN GARDE : l'applicateur de capteur contient désormais une aiguille. Ne touchez pas à l'intérieur de l'applicateur de capteur ou ne le remettez pas dans le pack de capteur.

- ÉTAPE 7 :** Placez l'applicateur de capteur au-dessus du site. Poussez fermement vers le bas pour appliquer le capteur.

MISE EN GARDE : NE poussez PAS l'applicateur de capteur vers le bas avant qu'il ne soit placé au-dessus du site préparé, pour éviter des résultats indésirables ou une lésion.

- ÉTAPE 8 :** Éloignez doucement l'applicateur de capteur.
- ÉTAPE 9 :** Assurez-vous que le capteur est bien fixé. Jetez le pack de capteur et l'applicateur de capteur usagés. Consultez la rubrique *Mise au rebut* dans le manuel d'utilisation.

Pour utiliser votre capteur, consultez toutes les notices fournies avec le kit de lecteur. Si vous utilisez FreeStyle LibreLink, consultez le manuel d'utilisation dans l'application.

- STAP 1:** Selecteer locatie.
- STAP 2:** Was locatie met gewone zeep, droog af en reinig met een alcoholdoekje. Laat de locatie aan de lucht drogen.
- STAP 3:** Trek het deksel helemaal van de sensorverpakking. Draai het dopje van de sensorapplicator los.

LET OP: De sensorcode op de sensorverpakking en de sensorapplicator moet hetzelfde zijn. NIET gebruiken indien de verpakking beschadigd is of al is geopend.

- STAP 4:** Lijn de donkere markering op de sensorapplicator uit met de donkere markering op de sensorverpakking. Druk de sensorapplicator, met de sensorverpakking op een harde ondergrond, stevig naar beneden totdat hij niet verder gaat.
- STAP 5:** Haal de sensorapplicator uit de sensorverpakking.
- STAP 6:** De sensorapplicator is nu klaar voor het aanbrengen van de sensor.








LET OP: De sensorapplicator bevat nu een naald. Raak de binnenkant van de sensorapplicator niet aan en stop hem ook niet terug in de sensorverpakking.

- STAP 7:** Plaats de sensorapplicator over de locatie. Druk de applicator stevig in om de sensor aan te brengen.

LET OP: Druk NIET op de sensorapplicator voordat deze over de voorbereide locatie is geplaatst. Zo voorkomt u onbedoelde resultaten of letsel.

- STAP 8:** Trek de sensorapplicator voorzichtig terug.
- STAP 9:** Controleer of de sensor goed vastzit. Werp de gebruikte sensorverpakking en sensorapplicator weg. Zie de paragraaf *Afvoer* in de gebruikershandleiding.

Raadpleeg al de productinformatie die is meegeleverd met de scannerkit voordat u de sensor gaat gebruiken. Bij gebruik van FreeStyle LibreLink raadpleegt u de gebruikershandleiding in de app.

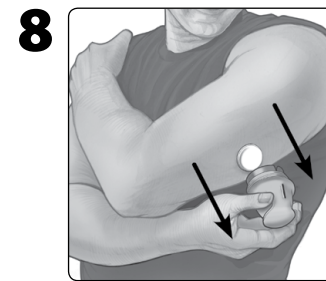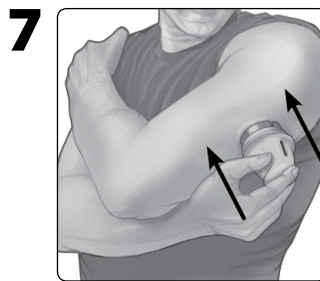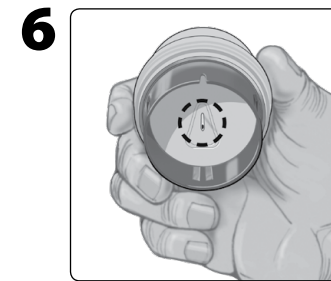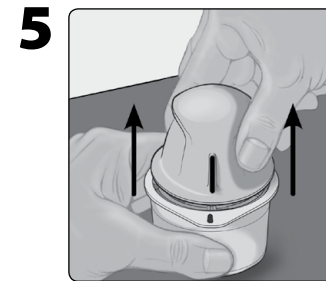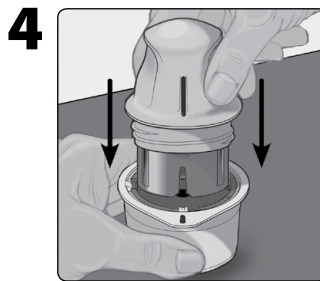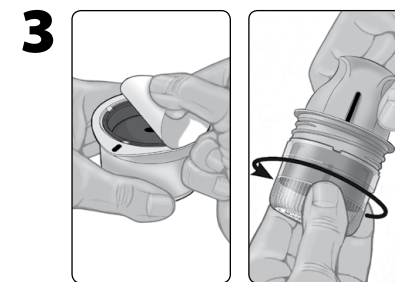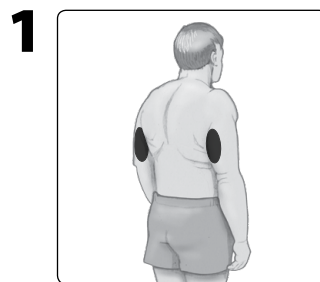

Hiermit erklärt Abbott Diabetes Care Ltd., dass der Funkanlagentyp FreeStyle Libre Sensor der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.diabetescare.abbott/doc

Le soussigné, Abbott Diabetes Care Ltd., déclare que le type d'équipement radioélectrique du capteur FreeStyle Libre est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante : www.diabetescare.abbott/doc

Hierbij verklaren wij, Abbott Diabetes Care Ltd., dat het type radioapparatuur van de FreeStyle Libre-sensor conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: www.diabetescare.abbott/doc

FreeStyle Libre Sensor

LESEN SIE ALLE PRODUKTUNTERLAGEN, DIE MIT DEM LESEGERÄTSET BEREITGESTELLT WERDEN, BEVOR SIE DIE EINZELNEN BESTANDTEILE DES SENSORSETS HERAUSNEHMEN. WENN SIE FREESTYLE LIBRELINK VERWENDEN, SCHLAGEN SIE IM BENUTZERHANDBUCH IN DER APP NACH.

Zur Verwendung mit: FreeStyle Libre Lesegerät und FreeStyle LibreLink App. (Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich.)

Anwendungsbereich

Der Sensor des FreeStyle Libre Flash Glukose Messsystems („Sensor“) ist bei Verwendung mit einem kompatiblen Gerät zur Messung der Glukosekonzentration in der interstitiellen Flüssigkeit bei an Diabetes mellitus erkrankten Personen ab 4 Jahren einschließliche Schwangeren angezeigt. Der Sensor und das kompatible Gerät sollen die Blutzuckerbestimmung bei der Selbstbehandlung von Diabetes, einschließliche der Dosierung von Insulin, ersetzen.

Die Indikation für Kinder (4 bis 12 Jahre) ist auf Kinder unter der Aufsicht einer mindestens 18 Jahre alten Betreuungsperson beschränkt. Die Betreuungsperson ist dafür verantwortlich, das Kind bei Verwendung des Sensors und des kompatiblen Geräts zu betreuen und dem Kind dabei zu helfen, die Sensor-Glukosewerte zu interpretieren bzw. dies selbst zu übernehmen.

KONTRAINDIKATIONEN:

Der Sensor muss vor einer Magnetresonanztomographie (MRT) entfernt werden.

WARNUNG:

• Der Sensor enthält Kleinteile, die beim Verschlucken gefährlich werden können.

Hinweis: Informationen darüber, was Ihre Sensor-Glukosewerte bedeuten, finden Sie im Benutzerhandbuch des Geräts, das Sie in Verbindung mit Ihrem Sensor verwenden.

VORSICHT:

• In seltenen Fällen kann es sein, dass die Sensor-Glukosewerte ungenau sind. Wenn Sie glauben, dass Ihre Messwerte nicht korrekt sind oder diese nicht mit Ihrem gesundheitlichen Befinden übereinstimmen, führen Sie bitte einen Blutzuckertest am Finger durch, um Ihren Glukosewert zu bestätigen, und vergewissern Sie sich, dass sich Ihr Sensor nicht von der Haut gelöst hat. Falls das Problem weiterhin besteht oder Ihr Sensor sich von der Haut gelöst hat, entfernen Sie den aktuellen Sensor und bringen Sie einen neuen an.

• Bei intensiver sportlicher Betätigung kann sich Ihr Sensor durch Schweiß oder Bewegung des Sensors lösen. Lösch sich Ihr Sensor von der Haut, erhalten Sie möglicherweise keine Messwerte oder nur unzuverlässige Messwerte, die nicht mit Ihrem gesundheitlichen Befinden übereinstimmen. Folgen Sie den Anweisungen zur Auswahl einer geeigneten Applikationsstelle.

• Sensoren nicht wiederverwenden. Der Sensor und der Sensorapplikator sind zum einmaligen Gebrauch bestimmt. Eine Wiederverwendung kann dazu führen, dass keine Glukose-Messwerte ermittelt werden können oder es zu einer Infektion kommt. Nicht zur Sterilisation geeignet. Eine weitere Bestrahlung kann zu ungenauen Ergebnissen führen.

• Sensorpackung und Sensorapplikator sind als Set verpackt und haben denselben Sensorcode. Überprüfen Sie, ob die Sensorcodes übereinstimmen, bevor Sie Sensorpackung und Sensorapplikator verwenden. Es sollten immer Sensorpackungen und Sensorapplikatoren mit demselben Sensorcode zusammen verwendet werden, da andernfalls Ihre Sensor-Glukosewerte eventuell falsch sind.

• Manche Personen reagieren möglicherweise empfindlich auf die Klebefolie, die den Sensor an der Haut fixiert. Wenn Sie erhebliche Hautreizungen um oder unter Ihrem Sensor bemerken, müssen Sie Ihren Sensor entfernen und den Gebrauch des Sensors einstellen. Kontaktieren Sie Ihr medizinisches Fachpersonal, bevor Sie den Gebrauch des Sensors fortsetzen.

Beschreibung

Der Sensor besteht zunächst aus zwei Teilen: der Sensorpackung und dem Sensorapplikator. Bereiten Sie den Sensor entsprechend den Anweisungen vor und bringen Sie ihn auf der Rückseite des Oberarms an. Der Sensor hat eine kleine, flexible Spitze, die sich direkt unter die Haut schiebt. Der Sensor kann bis zu 14 Tage getragen werden.

Bestandteile des Sensorsets



Sensorpackung

Wird mit dem Sensorapplikator verwendet, um den Sensor für den Gebrauch vorzubereiten.

Sensorapplikator

Bringt den Sensor am Körper an.

Alkoholtuch

Zur Vorbereitung der Haut vor Anbringen des Sensors.

Anwendersicherheit, Lagerung und Handhabung

- Die Sensorpackung ist bei ungeöffneter und unbeschädigter Verpackung steril.
- Bewahren Sie das Sensorset bei 4 °C bis 25 °C auf. Ihr Sensorset kann im Kühlschrank aufbewahrt werden, solange dessen Temperatur zwischen 4 °C und 25 °C liegt.
- Tests haben bestätigt, dass Ihr Sensor ein Untertauchen bis zu einem Meter (3 Fuß) unter der Wasseroberfläche bis zu 30 Minuten lang aushält. Er ist auch gegen das Einführen von Gegenständen mit einem Durchmesser von > 12 mm geschützt. (IP27)
- Nicht einfrieren. Nicht nach Ablauf des Verfallsdatums verwenden.
- Störsubstanzen: Sie können trotz Einnahme von Standard-Dosen von Ascorbinsäure (Vitamin C) Behandlungsentscheidungen mit dem Sensor treffen. Die Einnahme von mehr als der maximal empfohlenen Tagesdosis (RDA) an Ascorbinsäure kann die Sensormesswerte beeinflussen. Dadurch können die Werte höher erscheinen, als sie wirklich sind.
- Das Alkoholtuch enthält folgende Aufschrift: Reliject Prä-Injektions-Reinigungstupfer| 1 Tupfer | Zur Reinigung der Haut vor Injektionen | Getränkt mit Isopropylalkohol 70 %. Anleitung: Den Beutel aufreißen und den Tupfer entnehmen. An der Injektionsstelle beginnend die Haut zügig in kreisenden Bewegungen von innen nach außen abreiben. Nur zur äußerlichen Anwendung. Nur zur einmaligen Verwendung. Nach Verwendung entsorgen. NIEMALS zur Desinfektion eines invasiven Medizinprodukts verwenden. Vorsicht: Außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Augenkontakt vermeiden. Bei Kontakt mit den Augen diese mit Wasser ausspülen. Bei Hautirritationen oder Ausschlag Anwendung abbrechen. Nicht nach Ablauf des Verfallsdatums verwenden. Nicht zur Wiederverwendung.

Entsorgung

Anweisungen zur Entsorgung finden Sie im Benutzerhandbuch.

Capteur FreeStyle Libre

LISEZ TOUTES LES NOTICES FOURNIES AVEC LE KIT DE LECTEUR AVANT DE MANIPULER LES ÉLÉMENTS DU KIT DE CAPTEUR. SI VOUS UTILISEZ FREESTYLE LIBRELINK, CONSULTEZ LE MANUEL D'UTILISATION DANS L'APPLICATION.

À utiliser avec : le lecteur FreeStyle Libre et l'application FreeStyle LibreLink.

(Tous les produits ne sont pas disponibles dans tous les pays.)

Indications d'utilisation

Lorsqu'il est utilisé avec un appareil compatible, le capteur du Système Flash d'autosurveillance du glucose FreeStyle Libre (« capteur ») est indiqué pour mesurer les taux de glucose dans le liquide interstitiel chez les personnes (âgées de 4 ans et plus) atteintes de diabète sucré, y compris les femmes enceintes. Le capteur et l'appareil compatible sont conçus pour remplacer la mesure de la glycémie dans le cadre de la gestion autonome du diabète, y compris le dosage d'insuline.

L'indication chez les enfants (âgés de 4 à 12 ans) est limitée aux enfants qui sont sous la surveillance d'un aidant âgé d'au moins 18 ans. L'aidant est responsable de gérer ou d'aider l'enfant à gérer le capteur et l'appareil compatible, il doit également interpréter ou aider l'enfant à interpréter les résultats du taux de glucose affichés par le capteur.

CONTRE-INDICATIONS :

Le capteur doit être retiré avant de subir un examen d'imagerie par résonance magnétique (IRM).

AVERTISSEMENT :

• Le capteur contient des pièces de petite taille pouvant présenter un danger si elles sont avalées.

Remarque : pour obtenir des informations sur l'interprétation des résultats de taux de glucose affichés par le capteur, consultez le manuel d'utilisation de l'appareil que vous avez associé à votre capteur.

MISE EN GARDE :

- En de rares occasions, le capteur peut fournir des résultats inexacts de taux de glucose. Si vous pensez que vos résultats ne sont pas corrects ou qu'ils ne sont pas cohérents avec ce que vous ressentez, réalisez un test de glycémie sur votre doigt pour confirmer le taux de glucose et assurez-vous que le capteur ne s'est pas décollé. Si le problème persiste ou si le capteur se décolle, retirez le capteur et appliquez un nouveau capteur.
- Une activité physique intense peut décoller le capteur en raison de la sueur ou du mouvement du capteur. Si le capteur se décolle, il est possible que vous n'obteniez aucun résultat ou que les résultats non fiables, qui ne correspondent pas à ce que vous ressentez. Suivez les instructions pour choisir un site d'application approprié.
- Ne réutilisez pas les capteurs. Le capteur et l'applicateur de capteur sont destinés à un usage unique. Leur réutilisation peut entraîner l'absence de résultats de taux de glucose et un risque d'infection. Ils ne sont pas destinés à être résterilisés. Toute exposition ultérieure à l'irradiation pourrait donner des résultats inexacts.
- Le pack de capteur et l'applicateur de capteur sont conditionnés en tant que jeu et ils ont le même code de capteur. Vérifiez que les codes de capteur correspondent avant d'utiliser votre pack de capteur et votre applicateur de capteur. Les packs de capteur et les appliqueurs de capteur portant le même code de capteur doivent être utilisés ensemble, sans quoi les résultats de taux de glucose fournis par votre capteur pourraient être incorrects.
- Certaines personnes peuvent être sensibles à l'adhésif qui permet au capteur d'adhérer à la peau. Si vous remarquez une irritation cutanée importante sous le capteur ou autour de celui-ci, retirez-le et cessez d'utiliser le capteur. Contactez votre professionnel de santé avant de poursuivre l'utilisation du capteur.

Description

Le capteur est livré initialement en deux parties : l'une est le pack de capteur et l'autre est l'applicateur de capteur. Suivez les instructions pour préparer et appliquer le capteur sur l'arrière de la partie supérieure de votre bras. Le capteur comporte une petite extrémité souple qui s'insère juste en-dessous de la peau. Le capteur peut être porté pendant un maximum de 14 jours.

Éléments du kit de capteur



Sécurité de l'utilisateur, conservation et manipulation

- Le pack de capteur est stérile sauf s'il est ouvert ou endommagé.
- Conservez le kit de capteur à une température comprise entre 4 °C et 25 °C. Bien qu'il ne soit pas nécessaire de conserver votre kit de capteur au réfrigérateur, vous pouvez le faire à condition que la température à l'intérieur du réfrigérateur soit comprise entre 4 °C et 25 °C.
- Votre capteur a été testé pour résister à une immersion dans 1 mètre (3 pieds) d'eau pendant 30 minutes au maximum. Il est également protégé contre l'insertion d'objets dont le diamètre est supérieur à 12 mm. (IP27)
- Ne pas congeler. Ne pas utiliser le dispositif au-delà de la date de péremption.
- Substances interférentes : Vous pouvez prendre des doses standard d'acide ascorbique (vitamine C) et continuer à prendre des décisions concernant votre traitement à l'aide du capteur. La prise d'une dose d'acide ascorbique supérieure à la dose journalière maximale recommandée (RDA) peut affecter les résultats du capteur en affichant un taux supérieur au taux réel.
- La lingette imprégnée d'alcool est étiquetée comme suit : écouvillon pré-injection relject | 1 écouvillon | Utiliser pour nettoyer la peau avant l'injection | Saturé d'alcool isopropylique à 70 %. Consignes : Ouvrez le sachet en le déchirant et retirez l'écouvillon. En commençant à partir du site d'injection, frottez vigoureusement la peau d'un geste circulaire en vous éloignant du centre. Exclusemment pour usage externe. Exclusivement à usage unique. Jeter après utilisation. Ne JAMAIS utiliser pour désinfecter un dispositif médical invasif. Mise en garde : À tenir hors de portée des enfants. À tenir éloigné des yeux. En cas de contact avec les yeux, rincer à l'eau. En cas d'irritation cutanée ou d'irritation, arrêter l'utilisation. Ne pas utiliser au-delà de la date de péremption. Ne pas réutiliser.

Mise au rebut

Consultez le manuel d'utilisation pour les instructions de mise au rebut.

FreeStyle Libre-sensor

LEES ALLE INFORMATIE DIE BIJ DE SCANNERKIT GELEVERD WORDT VOORDAT U ONDERDELEN VAN DE SENSORKIT GEBRUIKT. BIJ GEBRUIK VAN FREESTYLE LIBRELINK RAADPLEEGT U DE GEBRUIKERSHANDLEIDING IN DE APP.

Voor gebruik met: FreeStyle Libre-scanner en FreeStyle LibreLink-app. (Niet alle producten zijn in alle landen verkrijgbaar.)

Indicates voor gebruik

Bi gebruik in combinatie met een compatibel apparaat is de sensor van het FreeStyle Libre Flash Glucose Monitoring-systeem (de 'sensor') geïndiceerd voor het meten van de glucosespiegel in interstitiële vloeistof bij personen (van 4 jaar en ouder) met diabetes mellitus, waaronder zwangere vrouwen. De sensor en het compatibele apparaat dienen ter vervanging van het testen van bloedglucose, inclusief bepaling van de insulinedosis, bij de zelfbehandeling van diabetes.

De indicatie voor kinderen (van 4 tot 12 jaar) geldt uitsluitend voor kinderen die worden begeleid door een verzorger die ten minste 18 jaar is. Het is de verantwoordelijkheid van de verzorger om de sensor en het compatibele apparaat te hanteren of het kind daarbij te helpen en om de sensorglucosemetingen te interpreteren of het kind daarbij te helpen.

CONTRA-INDICATIE:

De sensor moet worden verwijderd voordat een MRI-scan wordt uitgevoerd.

WAARSCHUWING:

• De sensor bevat kleine onderdelen die gevaarlijk kunnen zijn als ze worden ingeslikt.

NB: Voor informatie over wat uw sensorglucosemeting betekent, zie de gebruikershandleiding van het apparaat dat u met uw sensor gebruikt.

LET OP:

- In zeldzame gevallen kunt u onnaaukeurige sensorglucosemetingen krijgen. Als u denkt dat uw metingen niet correct zijn of niet overeenkomen met hoe u zich voelt, moet u een bloedglucosetest op uw vinger uitvoeren om uw glucose te bevestigen en controleren of uw sensor niet los is gekomen. Als het probleem zich blijft voordoen of als uw sensor los begint te raken, verwijderd u de huidige sensor en brengt u een nieuwe aan.
- Door intensieve lichaamsbeweging kan uw sensor losraken als gevolg van zweet of verplaatsing van de sensor. Als uw sensor losraakt, kan het gebeuren dat u geen metingen of onbetrouwbare metingen krijgt, die wellicht niet overeenkomen met hoe u zich voelt. Volg de aanwijzingen op voor de selectie van een geschikte aanbrenghooftele.
- Sensors niet opnieuw gebruiken. De sensor en sensorapplicator zijn bedoeld voor eenmalig gebruik. Opnieuw gebruiken kan ertoe leiden dat de sensor niet of niet goed functioneert of dat er infectie optreedt. Niet geschikt voor hersterilisatie. Na verdere blootstelling aan straling kunnen de resultaten onnaauwkeurig zijn.
- De sensorverpakking en sensorapplicator zijn als een set verpakt en hebben dezelfde sensorcode. Controleer of de sensorcodes overeenkomen voordat u de sensorverpakking en sensorapplicator gebruikt. Sensorverpakkingen en sensorapplicators met dezelfde sensorcode moeten samen worden gebruikt, anders kunnen uw sensorglucosemetingen onjuist zijn.
- Sommige personen zijn mogelijk overgevoelig voor het hechtmiddel waarmee de sensor op de huid wordt geplakt. Bij ernstige huidirritatie rond of onder uw sensor verwijderd u de sensor en staakt u het gebruik van de sensor. Neem contact op met uw behandelaar alvorens de sensor verder te gebruiken.

Beschrijving

De sensor wordt in twee delen geleverd: één deel is de sensorverpakking en het andere deel is de sensorapplicator. Volg de aanwijzingen om de sensor voor te bereiden en aan te brengen op de achterkant van uw bovenarm. De sensor heeft een kleine, buigzame punt die net onder de huid wordt ingebracht. De sensor kan maximaal 14 dagen worden gedragen.

Onderdelen sensorkit



Sensorverpakking

Wordt gebruikt met de sensorapplicator om de sensor voor te bereiden voor gebruik.

Sensorapplicator

Voor het aanbrengen van de sensor op het lichaam

Alcoholdoekje

Voor het voorbereiden van de huid op het aanbrengen van de sensor.

Veiligheid van de gebruiker, bewaring en gebruik

- De sensorverpakking is steriel tenzij deze geopend of beschadigd is.
- Bewaar de sensorkit tussen 4 °C en 25 °C. Hoewel u uw sensorkit niet in een koelkast hoeft te bewaren, kunt u dat toch doen zolang de temperatuur van de koelkast tussen 4 °C en 25 °C bedraagt.
- Uw sensor is getest en kan één meter (3 ft) onder water worden gehouden gedurende maximaal 30 minuten. Uw sensor wordt ook beschermd tegen inbrenging van voorwerpen > 12 mm diameter. (IP27)
- Niet in de vriezer bewaren. Niet gebruiken na de uiterste gebruiksdatum.
- Verstorende stoffen: U kunt standaarddoseringen van ascorbinezuur (vitamine C) nemen en nog steeds behandelingsbeslissingen nemen met de sensor. Wanneer u meer inneemt dan de maximale dagelijkse hoeveelheid (ADH) ascorbinezuur, dan kan dit de sensormetingen beïnvloeden en ze hoger laten lijken dan ze in werkelijkheid zijn.
- De specificaties van het alcoholdoekje zijn als volgt: relject pre-injectiedoekje | 1 doekje | Te gebruiken voor het reinigen van de huid voorafgaand aan injectie | Verzadigd met 70% isopropylalcohol. Aanwijzingen: Scheur het zakje open en neem het doekje er uit. Begin op de plaats van injectie en wrijf met een cirkelbeweging stevig over de huid, beweeg naar buiten toe. Uitsluitend voor uitwendig gebruik. Uitsluitend voor eenmalig gebruik. Na gebruik wegwerpen. NOOIT gebruiken voor het desinfecteren van een invasief medisch hulpmiddel. Let op: Buiten bereik van kinderen houden. Vermijd contact met de ogen. Bij contact met een doekje spoelen met water. Staak het gebruik bij huidirritatie of huiduitslag. Niet gebruiken na de uiterste gebruiksdatum. Niet opnieuw gebruiken.

Afoer

Raadpleeg de gebruikershandleiding voor instructies over het afoeren.

Vertrieb durch | Distribué par | Gedistribueerd door:

Abbott S.A. / N.V.
Abbott Diabetes Care
Avenue Einstein 14
B-1300 Wavre
Belgium
Belgium 0800 167 72
Luxembourg 8002 54 87

Importeur (Europäische Union) | Importateur (Union européenne) | Importeur (Europese Unie):

Abbott GmbH
Max-Planck-Ring 2
65205 Wiesbaden
Germany

Symbole auf der Verpackung | Symboles sur l'étiquetage | Etiketsymbolen

   	   
Sterilbarriere. Siehe Gebrauchsanweisung, falls geöffnet oder beschädigt. Protection stérile. Consultez le mode d'emploi si l'emballage est ouvert ou endommagé. Steriele barrière. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing indien geopend of beschadigd.	Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist. Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé. Niet gebruiken als de verpakking beschadigd is. Für Sterilbarriere: Nicht verwenden, wenn das Sterilbarrieresystem des Produkts oder dessen Verpackung beeinträchtigt ist. Protection stérile : Ne pas utiliser si le système de protection stérile ou l'emballage du produit est endommagé. Voor de steriele barrière: Niet gebruiken als het steriele-barrieresysteem van het product of de verpakking daarvan niet intact is.

CODE	Sensorcode Code du capteur Sensorcode
	Nicht wiederverwenden Ne pas réutiliser Niet opnieuw gebruiken
 	Mit Strahlung sterilisiert Stérilisé par irradiation Gesteriliseerd door middel van straling
	Verfallsdatum Date de péremption Uiterste gebruiksdatum
	Serienummer Numéro de série Serienummer
	Vorsicht Mise en garde Let op
	Temperaturbegrenzung Limite de température Temperatuurgrens
	Einfach-Sterilbarrieresystem Système de protection stérile unique Toepassing van een enkelvoudige steriele barrière
	Anwendungsteil des Typs BF Équipement de type BF Type BF-apparaat
	Hersteller Fabricant Fabrikant
	Herstellungsdatum Date de fabrication Productiedatum
	Gebrauchsanweisung beachten Consulter le mode d'emploi Raadpleeg de gebruiksaanwijzing
	Chargencode Code de lot Batchcode
	Bestellnummer Numéro de référence Catalogusnummer
	CE-Kennzeichnung Marquage CE CE-markering
	Autorisierte Vertretung in der Europäischen Gemeinschaft Mandataire établi dans la Communauté européenne Gemachtigde in de Europese Gemeenschap
	Feuchtigkeitsbegrenzung Limite d'humidité Vochtigheidsgrenzen
	Dieses Produkt darf nicht mit dem gewöhnlichen Hausmüll entsorgt werden. Elektro- und Elektronik-Altgeräte sind in der Europäischen Union gem. Richtlinie 2012/19/EG separat zu sammeln. Nähere Informationen erhalten Sie beim Hersteller.
	Ce produit ne doit pas être éliminé dans les déchets municipaux. La directive 2012/19/CE impose la collecte sélective des déchets d'équipements électriques et électroniques au sein de l'Union européenne. Contactez le fabricant pour les détails. Dit product mag niet via de gemeentelijke vuilnisdienst worden afgevoerd. In de Europese Unie moet afgedankte elektrische en elektronische apparatuur volgens richtlijn 2012/19/EG gescheiden worden afgevoerd. Neem contact op met de fabrikant voor de bijzonderheden.