

VAIHE 1: Valitse kohta.

VAIHE 2: Pese kohta tavallisella saippualla, kuivaa ja puhdista sitten alkoholipyyhkeellä. Anna kohdan kuivua.

VAIHE 3: Kierrä korkki irti sensorin asettimesta.

HUOMIO:

- ÄLÄ käytä, jos tuote on vaurioitunut tai suojaiteippi osoittaa, että sensorin asetin on jo avattu.
- ÄLÄ aseta korkkia takaisin, koska se voi vahingoittaa sensoria.
- ÄLÄ kosketa sensorin asettimen sisäpuolta, koska siellä on neula.

VAIHE 4: Aseta sensorin asetin kohdan päälle. Aseta sensori painamalla asetinta lujasti alaspäin.

HUOMIO: Sensorin asetinta EI saa painaa, ennen kuin se on asetettu valmistellun kohdan päälle, jotta ei aiheudu tahattomia seurauksia tai vammaa.

VAIHE 5: Vedä sensorin asetin varovasti irti iholta.

VAIHE 6: Varmista, että sensori on kunnolla kiinnittynyt. Hävitä käytetty sensorin asetin. Katso käyttäjän ohjekirjan kohta *Hävittäminen*.

Katso sensorin käyttöohjeet FreeStyle Libre 3 -sovelluksen käyttäjän ohjekirjasta.

TRINN 1: Velg påføringssted.

TRINN 2: Rengjør stedet med vanlig såpe, tørk og rengjør deretter med en spritserviett. La det lufttørke.

TRINN 3: Skru av hetten på sensorapplikatoren.

FORSIKTIG:

- Skal IKKE brukes hvis den er skadet eller manipulasjonsetiketten indikerer at sensorapplikatoren allerede har vært åpnet.
- IKKE sett på hetten igjen, da det kan skade sensoren.
- IKKE rør innsiden av sensorapplikatoren, da den inneholder en nål.

TRINN 4: Plasser sensorapplikatoren over påføringsstedet. Trykk godt ned for å påføre sensoren.

FORSIKTIG: For å hindre utilsiktede resultater eller skader må du IKKE trykke ned på sensorapplikatoren før den er plassert over det klargjorte påføringsstedet.

TRINN 5: Trekk sensorapplikatoren forsiktig bort.

TRINN 6: Pass på at sensoren sitter godt fast. Kast den brukte sensorapplikatoren. Se delen *Kassering* i brukerhåndboken.

Se i brukerhåndboken i FreeStyle Libre 3-appen for bruken av sensoren.

STEG 1: Vélj ett ställe.

STEG 2: Tvätta stället med vanlig tvål, torka och rengör sedan med alkoholservett. Låt stället lufttorka innan du fortsätter.

STEG 3: Skruva loss hylsan från sensorapplikatoren.

FÖRSIKTIG:

- Använd INTE om sensorapplikatoren verkar vara skadad eller om förseglingsetiketten anger att sensorförpackningen redan är öppnad.
- Sätt INTE på locket igen eftersom det kan skada sensorn.
- Vidrör INTE sensorapplikatorns insida eftersom den innehåller en nål.

STEG 4: Placera sensorapplikator över stället. Tryck ner ordentligt för att applicera sensorn.

FÖRSIKTIG: Tryck inte ned sensorapplikatoren förrän den placerats över ett förberett ställe för att förhindra oavsiktliga resultat eller skada.

STEG 5: Dra försiktigt bort sensorapplikatoren.

STEG 6: Kontrollera att sensorn sitter säkert. Kassera den använda sensorapplikatoren. Se *Kassering* i bruksanvisningen.

För att använda sensorn, se bruksanvisningen i FreeStyle Libre 3-appen.


1




2




3

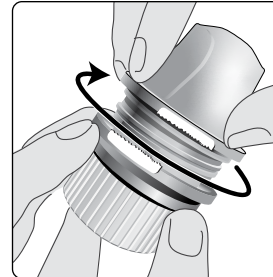

4

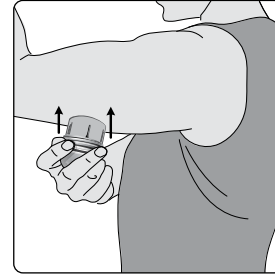

5

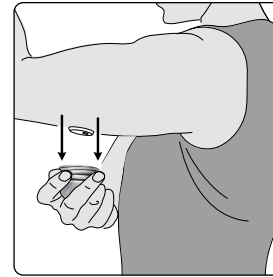

6



Abbott Diabetes Care Ltd. vakuuttaa täten, että radiolaitetyyppi FreeStyle Libre 3 -sensori on direktiivin 2014/53/EU vaatimusten mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavasta internetosoitteesta: www.diabetescare.abbott/doc

Abbott Diabetes Care Ltd. erklærer herved at radioutstyrstypen FreeStyle Libre 3-sensor overholder kravene i direktiv 2014/53/EU. Den fullstendige teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende Internett-adresse: www.diabetescare.abbott/doc

Härmed försäkrar Abbott Diabetes Care Ltd. att radioutrustningen av typen FreeStyle Libre 3-sensor, överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. EU-direktivets fullständiga text avseende försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig på följande internetadress: www.diabetescare.abbott/doc

Lataa FreeStyle Libre 3 -sovellus ja käynnistä sensori noudattamalla sovelluksen ohjeita.



GET IT ON
Google Play

Last ned FreeStyle Libre 3-appen og følg trinnene i appen for å starte sensoren.



TILGJENGELIG PÅ
Google Play

Hämta FreeStyle Libre 3-appen och följ stegen i appen för att starta sensorn.



LADDA NED PÅ
Google Play